

Made in Italy



1989

Gesan Production srl

+39 0924912534  
overseas@gesanproduction.it

www.gesanproduction.it



ISO 9001:2015



ISO 13485:2016



# HEMOVET<sup>3</sup> diff

- > *Reagenti di Chimica Clinica*
- > *Reagenti Oem e Bulk*
- > *Biochimica Veterinaria*
- > *Tossicologia*
- > *Analizzatori da Laboratorio*

## Analizzatori Linea Veterinaria



HEMOVET<sup>3</sup> diff



HEMOVET<sup>5</sup> diff



Smart LYTE<sup>vet</sup>



Piccolo Chem<sup>vet</sup>



Chem 200<sup>vet</sup>



Piccolo Chem



Chem 200



Chem 300 plus




Contaglobuli automatico veterinario

3 popolazioni



Made in Italy



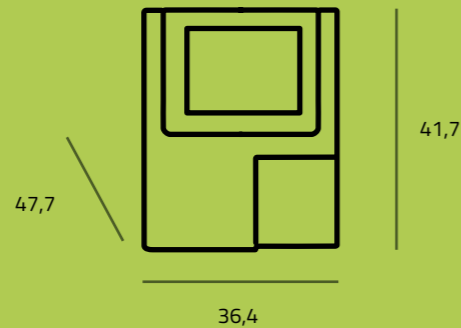

**DIMENSIONE (cm)**  
**PESO 26 kg**

## HEMOVET 3 diff

### Parametri

19 parametri: WBC, Gran#, Lym#, Mid#, Gran%, Lym%, Mid%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT  
3 istogrammi per WBC, RBC and PLT

### Principi

Conta WBC, RBC e PLT con sistema impedenziometrico  
Conta HGB fotometrica (colorimetrica)  
con lisante privo di cianuro

### Portata

Fino a 40 test/ora

### Volume del campione

17 µL

### Modalità di campione

Sangue intero e prediluito

### Archiviazione

Fino a 50.000 analisi, con dati e grafici

### Ripetibilità

WBC: ≤ 3.0% (4.00-15.00x10<sup>9</sup>/L)  
RBC: ≤ 2.0% (>3.50x10<sup>12</sup>/L)  
HGB: ≤ 2.0% (110-180g/L)  
MCV: ≤ 1.0% (70.0-110.0fL)  
PLT: per cane ≤ 6.0% (100-500x10<sup>9</sup>/L)  
per gatto ≤ 10.0% (100-500x10<sup>9</sup>/L)

### Monitor

Touch screen da 10.4"

### Comunicazione

Supporto LIS bidirezionale

### Interfaccia


4 porte USB e 1 porta LAN

### Linearity range

WBC: 0.00-200 x 10<sup>9</sup>/L  
RBC: 0.00-17.00 x 10<sup>12</sup>/L  
HGB: 0-250g/L  
PLT: 0-3000 x 10<sup>9</sup>/L  
HCT: 0.0-67%

### Potenza elettrica/consume elettrico

100V-240V ~, 50/60Hz

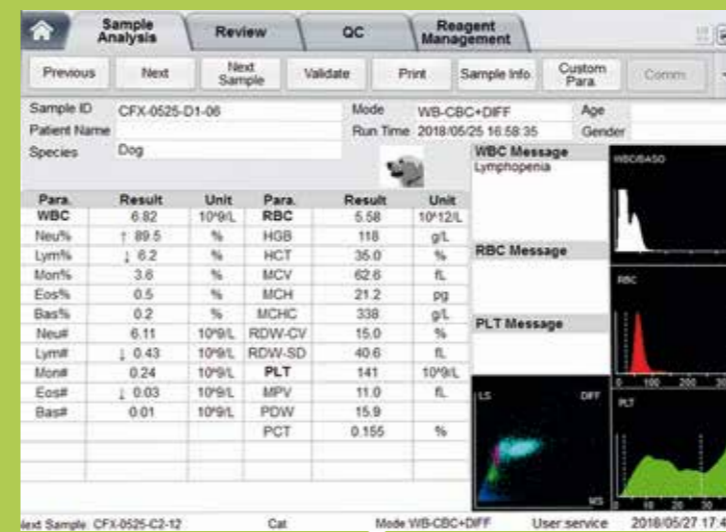

**Contaglobuli automatico  
a 3 popolazioni per la diagnostica veterinaria**

**Diverse specie animali disponibili per la conta:  
gatto, cane, coniglio, bovino, cavallo e pecora**

**Eccellente ripetibilità e ampi intervalli  
di linearità dei parametri**

**Lisante posizionato all'interno  
per un minor ingombro**

**Stampante termica integrata, supporta anche stampanti  
esterne per refertazione in A4**

**Confezionamenti reagenti ridotti per  
evitare inutili sprechi**

