




Il più avanzato Analizzatore di Elettroliti
per la Diagnostica Veterinaria

Smart LYTE VET

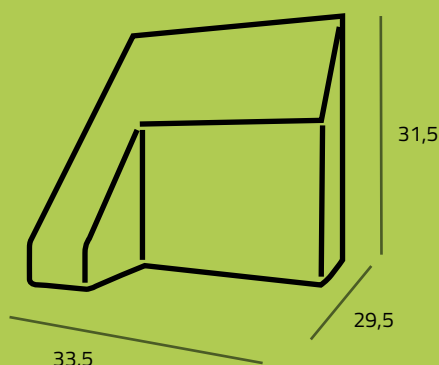

DIMENSIONI (cm)
PESO 6 kg



Interfaccia grafica
touch screen da 5"
multilingue
supporto remoto online

Operatività
5 parametri totali
4 parametri simultanei
tempo di analisi di 28 sec (512/ora)

Archivio dati
10.000 risultati di pazienti
10.000 risultati di QC per livello

Connettività
LAN, WiFi, 4 porte USB RS232, LIS
100-240V ~ 50/60Hz
1.6 A, 50 Watts

Reazione
sangue intero, siero (95 µl)
plasma, QC (95 µl)
urine (180 µl)

Calibrazione
2 punti ogni 4 ore
1 punto ogni campione
manuale

Profili veterinari
felino, canino, bovino, equino,
suino, ovino, murino o aperto

L'analizzatore di elettroliti **Smart LYTE VET** di **Gesani Production** è un sistema completamente automatizzato che misura Na^+ , K^+ , Cl^- , Ca^{++} e Li^+ in sangue intero, siero, plasma e urina utilizzando la tecnologia Ion Selective Electrode (ISE). Gesani SmartLyte Vet è dotato di un potente microprocessore, di uno schermo touchscreen e di una interfaccia grafica intuitiva capace di comunicare con i sistemi LIS esterni. L'analizzatore è associato a uno scanner di codici a barre e memorizza oltre 10.000 risultati dei pazienti. Il sistema attualmente opera in oltre 12 lingue e offre ai laboratori veterinari la possibilità di utilizzare l'analizzatore per diverse specie animali.

GESANI PRODUCTION SRL

+39 0924912534
overseas@gesaniproduction.it

www.gesaniproduction.it



ISO 9001:2015



ISO 13485:2016

Analizzatori Linea Veterinaria



HEMOVET 3 diff



HEMOVET 5 diff



Smart LYTE vet



Piccolo Chem^{vet}



Chem 200^{vet}